

改訂年月日 : \*\*2012年09月15日 (第11版)  
\*2010年07月16日 (第10版)

医療機器承認番号: 20600BZZ00097000

### 機械器具(47)注射針及び穿刺針

高度管理医療機器	麻酔用滅菌済み穿刺針	70203003
( 高度管理医療機器	硬膜外投与用針	36191010 )
( 高度管理医療機器	麻酔脊髄用針	35212000 )
( 高度管理医療機器	脊髄くも膜下・硬膜外針	36191020 )
( 管理医療機器	単回使用組織生検用針	12734010 )
( 管理医療機器	単回使用羊水穿刺針	70220000 )
( 管理医療機器	イントロデューサ針	12727020 )

### \*UNIEVER 穿刺針(ディスプレイザブル硬膜外麻酔針)

#### 再使用禁止

##### 【警告】

- ・本品を穿刺中に骨に当たる等により強い抵抗を感じた場合や、内針抜去後の外針のみの場合は無理な力で前進及び操作しないで下さい。[針の曲り・折れの恐れがあります。]
- ・本品を穿刺の際、針は慎重に進めて下さい。  
[神経等を損傷する恐れがあります。]
- ・カテーテル挿入時に抵抗が強い場合は無理に挿入せず、挿入を中断して穿刺針とカテーテルを注意しながら一緒に抜去し、異常が無いことを確認し最初からやり直して下さい。カテーテル及び穿刺針に異常があった場合、新しいものと交換して下さい。  
[カテーテルが屈曲、反転、結節形成等を起こしている可能性があります。この場合、穿刺針の刃先やアゴでカテーテルを損傷し、留置中あるいは抜去時に切断する恐れがあります(図2, 3参照)。切断した場合、硬膜外腔など体内への遺残の危険性があります。]

##### 【禁忌・禁止】


- ・再使用禁止。[感染を引き起こす恐れがあります。]
- ・再滅菌禁止。
- ・カテーテルを使用する場合、本品のサイズに適合しないサイズのもの使用しないで下さい。
- ・消毒が施されていない皮膚へは穿刺しないで下さい。
- ・穿刺針が穿刺されている状態でカテーテルを引き抜かないで下さい。また、この状態で穿刺針を押し進めないで下さい。  
[カテーテルを切断する恐れがあります。切断した場合、硬膜外腔など体内への遺残の危険性があります。]

##### 【原則禁忌】

- ・椎弓切除術の既往のある患者や、脊柱変形が認められる患者  
[これらの患者は、棘突起変形や椎間孔狭窄を起こしている可能性があります。この場合、骨にカテーテルが圧迫され、カテーテルの挿入困難、あるいはカテーテル切断の恐れがあります。切断した場合、硬膜外腔など体内への遺残の危険性があります。]

#### 【形状、構造及び原理等】

##### 1) 構造(代表図)

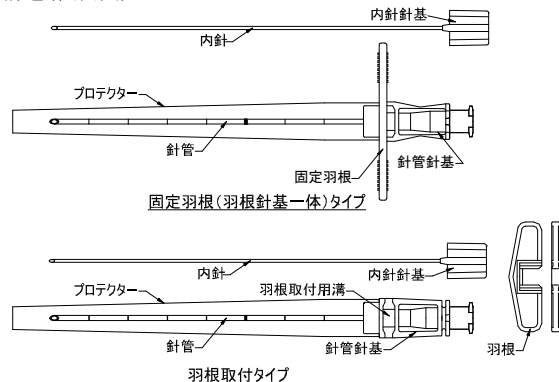

##### 2) 人体に接触する部分の組成

針管・・・ステンレススチール JIS G 4305 SUS304  
内針・・・ステンレススチール JIS G 4305 SUS304  
又は、ポリプロピレン

##### 【使用目的、効能又は効果】

外科用穿刺針として使用する。

##### 【品目仕様等】

項目	外径(mm)	規格値
引抜き強さ	0.3~0.5	22N以上
	0.55~0.65	34N以上
	0.7	40N以上
	0.8	44N以上
	0.9	54N以上
弾性	1.1以上	69N以上
	1.0以下	元の位置に復元すること
曲げ強さ	上記以外	-(適用外)
	1.0以下かつ公称長さ12mm以上	折れるものではないこと
	上記以外	-(適用外)

##### 【操作方法又は使用方法等】

- 1) 使用に際しては、あらかじめ充分、且つ適切な準備を行って下さい。  
針に曲がりや損傷がある場合は使用しないで下さい。
- 2) 針の刃先に損傷がないこと、内針の刃面が針管の刃面よりも出ていないこと、内針がスムーズに動くことを確認して下さい。
- 3) 羽根取付タイプのものは、羽根をノッチ側から接続して下さい。(図1)

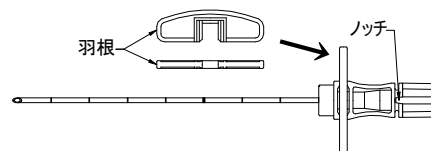


図1. 羽根の接続方法

- 4) 穿刺部位を十分消毒して下さい。
  - 5) 所定の部位に慎重に穿刺して下さい。
  - 6) 穿刺後、靱帯の抵抗を認めたら内針を抜去して下さい。
  - 7) LOR注射筒による抵抗消失法(Loss of Resistance method)等により、針管の刃先を硬膜外腔まで進めて下さい。
  - 8) カテーテルを使用する場合は、針管の内径に合ったカテーテルを目的の長さまで針管内を通して挿入し、カテーテルを所定の位置に留置したまま、針管のみを慎重に抜去して下さい。  
(針管を引き抜く際、一緒にカテーテルを引き抜かないように注意して下さい。)
- カテーテルを使用しない場合は、局所麻酔薬注入の手技を終了後、針管を慎重に抜去して下さい。

## <使用方法に関連する使用上の注意(硬膜外麻酔手技)>

- ・カテーテルを必要以上に挿入しないで下さい。カテーテルの挿入は穿刺針先端から5cm程度として下さい。[カテーテルが屈曲、反転、結節形成等を起こす可能性があります。この場合、穿刺針の刃先やアゴでカテーテルを損傷し、留置中あるいは抜去時に切断する恐れがあります。]
- ・穿刺針を抜去し始めたら、再挿入しないで下さい。[穿刺針の刃先やアゴでカテーテルを損傷し、切断に至る可能性があります。]

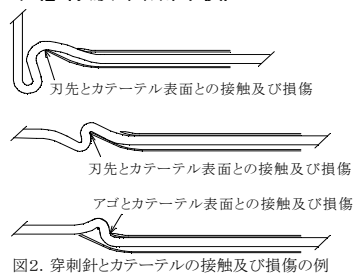


図2. 穿刺針とカテーテルの接触及び損傷の例

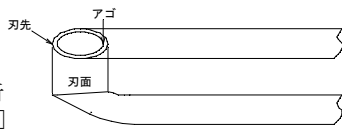


図3. 穿刺針先端部の名称

## 【使用上の注意】

### 1. 重要な基本的注意

- ・使用前に必ず添付文書をお読み下さい。
- ・本品は使用における手技に精通した術者が使用して下さい。
- ※・本品の使用に際し、術者は患者の既往症に十分に注意を払って下さい。
- ・全ての操作は無菌的に行い、患者の血液及び体液への細菌等の接触に対する予防措置を常時行して下さい。
- ・使用前に製品を十分に点検し、異常が認められるものは使用しないで下さい。
- ・本品に改造を加えないで下さい。
- ・針管保護用のプロテクターを外す際、針管に過剰な圧力がかからないよう、また、針管に直接手を触れないよう注意して下さい。
- ・カテーテルを使用する際、通りが困難な場合は使用を中断して下さい。
- ・本品の使用中に針管の曲がり等異常を感じた場合は、使用を中断して下さい。無理な操作により針が折れ体内に遺残する恐れがあります。
- ・本品を使用中、内針抜去後の外針のみの状態で無理な力で回転させないで下さい。針が折れる恐れがあります。
- ・手技中の患者の体動により針の曲がり・折れの恐れがあります。特に小児への使用には充分注意して下さい。
- ・包装が破損したり、汚損している場合は使用しないで下さい。
- ・包装に使用期限等の表示がないものは使用しないで下さい。
- ・使用期限の切れたものは使用しないで下さい。
- ・包装の開封後は速やかに使用して下さい。
- ・使用後は、針刺し事故に注意し、速やかに廃棄処分して下さい。

### 2. 相互作用(併用注意)

- ※・麻酔薬注入のために針管針基テーパ部に他の医療機器を接続する場合、ISO594-1:1986 に適合したルアー形状のものを接続して下さい。適合しない場合、麻酔薬が漏出する可能性があります。
- ※※・脂肪乳剤(又は、脂肪乳剤を含有する製剤)、油性成分、界面活性剤又はエタノール等の溶解補助剤を含み、かつ投与が持続的に行われる可能性のある注射剤と、ポリカーボネートを原材料とした本品の針管針基を併用した場合、本品の針管針基が破損を起こし、液漏れが起こる可能性がありますので注意して下さい。
- ・本品に他の医療機器を接続して使用する場合は、その製品の添付文書又は取扱説明書をよく読み、その指示に従って使用して下さい。

### 3. 不具合・有害事象

#### 1) 不具合

- 本品の使用に伴い、以下のような不具合が発生する可能性があります。
- ・折れ、曲がり
  - ・先端の潰れ、曲がり
  - ・針管針基の破損及び破損による液漏れ

#### 2) 有害事象

術者は、本品を用いた硬膜外麻酔手技に伴い、及び患者の状態によって起こりうる以下の有害事象に留意する必要があります。

- ・硬膜穿刺
- ・低血圧
- ・全脊髄くも膜下麻酔
- ・硬膜外血腫、膿瘍形成
- ・尿閉
- ・局所麻酔薬中毒
- ・局所麻酔薬くも膜下注入、血管注入、硬膜下注入
- ・神経または脊髄の損傷
- ・嘔気、嘔吐
- ・感染

## 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

### <貯蔵方法>

水濡れに注意し、直射日光及び高温・低温・多湿を避けて保管して下さい。

(低温(氷点下)下で衝撃を与えると樹脂部品(プロテクター、羽根等)が割れる恐れがあります。)

### <使用期限>

個別包装に記載されています。(自己認証により設定)

## 【包装】

- ・1~25本/箱

## ※※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

- ・製造販売元:  
一株式会社ユニシス  
埼玉県越谷市西方2675-1  
(緊急連絡先)TEL:03-5812-7768(国内営業部)
- ・製造元:  
一株式会社ユニシス